

01/2025

LOCAÇÃO – MULETAS EM ALUMÍNIO
Apenas produtos novos e seminovos
Período mínimo de locação: mensal


P. 1/1

(imagens ilustrativas)

Tratamento técnico exclusivo e especializado, feito artesanalmente, antes do aluguel de nossos produtos, para facilitar e prolongar a manutenção, o conforto e a beleza por muito mais tempo.

Visando auxiliar os pacientes e seus familiares, havendo adaptação ao produto, poderemos vendê-lo após o primeiro mês de locação.

Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.

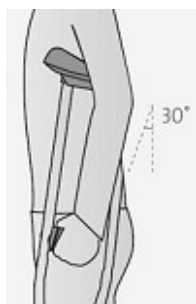

Altura de todos os modelos é regulável.

O corpo é apoiado pelas mãos, com os punhos na direção do quadril do/a paciente e com os braços dobrados em 30°, mantendo as ponteiros em 10 cm da lateral dos pés.

Muleta Axilar: deve ficar 3 cm abaixo das axilas - medir a altura entre as axilas do/a paciente e o chão.

Muleta Canadense: medir a altura entre as mãos e o chão, com os braços dobrados em 30°.

Comparar com as medidas deste folder.

Considerar a capacidade de peso.



OPL 01.1 – Par de Muletas Axilar
Capacidade: 150 kg

Altura regulável: de 112 cm até 157 cm

Medida do apoio da axila até o chão



OPL 01.3 – Par de Muletas Canadense
Braçadeira Fechada
Capacidade: 100 kg

Altura regulável: de 72 cm a 94 cm

Medida do apoio das mãos até o chão



OPL 01.5 – Par de Muletas Canadense
Braçadeira Aberta
Capacidade: 120 kg e 150 kg

Altura regulável: de 73 cm a 96 cm

Medida do apoio das mãos até o chão